



ADE

Digital XL personlig vægt Valerie

Dansk



Betjeningsvejledning

BE 2304





Kære kunde, Kære kunde!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt fra ADE, der kombinerer intelligente funktioner med et exceptionelt design. Denne personvægt giver dig mulighed for at måle og kontrollere din kropsvægt. ADE-mærkets mangeårige erfaring sikrer en høj teknisk standard og gennemprøvet kvalitet. Vi ønsker dig god fornøjelse med vejningen og held og lykke med at nå din ønskede vægt!

Dit ADE-team

Generelt

Om denne vejledning



Denne betjeningsvejledning beskriver sikker brug og vedligeholdelse af produktet. Opbevar betjeningsvejledningen, så du kan slå information op senere. Hvis du videregiver produktet til en anden, skal du også give denne vejledning med. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning kan medføre personskaade eller beskaadigelse af produktet.

Symbolforklaring



Dette symbol i forbindelse med ordet FARE advarer om alvorlige personskaader.



Dette symbol i forbindelse med ordet ADVARSEL advarer om personskaader af moderat til let grad.



Dette symbol i forbindelse med ordet BEMÆRK advarer om materiel skade.



Dette symbol angiver yderligere information og generelle henvisninger.



Indholdsfortegnelse

Generelt.....	2
Sikkerhed.....	4
Formålsbestemt brug.....	5
Oversigt.....	6
Leveringsomfang.....	6
Idriftsættelse	7
Vejning	8
Nulstil vægt.....	8
Rengøring	8
Fejlfinding / Afhjælpning.....	9
Tekniske specifikationer	9
Overensstemmelseserklæring	10
Garanti	10
Bortskaffelse.....	11



Sikkerhed

- Denne artikel kan anvendes af børn fra 8 år og op samt personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker anvendelse af artiklen og forstår de deraf følgende risici.
- Børn må ikke lege med vægten.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og under opsyn.
- Batterier kan være livsfarlige, hvis de sluges. Opbevar derfor vægten og batteriet utilgængeligt for små børn. Hvis et batteri er blevet slugt, skal der straks søges lægehjælp.

FARE for børn

- Hold børn væk fra emballagen. Kvælningsfare ved indtagelse. mSørg også for, at emballageposen ikke trækkes over hovedet.

FARE for brand/forbrænding og/eller eksplosion

- Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Udskift kun batteriet med samme eller en tilsvarende batteritype. Se de „Tekniske data“.
- Batterier må ikke oplades, forsøges genoplivet, skilles ad, kastes i åben ild eller kortsluttes. I modsat fald er der øget risiko for eksplosion og lækage, og der kan desuden frigives gasser!
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skylles de berørte områder straks med rigeligt rent vand, og søg omgående læge.

ADVARSEL – risiko for personskade

- Hvis vægten tabes og går i stykker, er der risiko for personskade på grund af glaskår.
- Undgå at træde ud på den yderste kant af vægten. Fare for at vælte!
- Brug ikke vægten med våde fødder, og betræd ikke vægten, hvis overfladen er fugtig. Risiko for at glide!



FORSIGTIG ved materielle skader


- Placér vægten på et stabilt og jævnt underlag.
- Overbelast ikke vægten. Overhold de „Tekniske data“. Stil dig kun på vægten for at blive vejlet.
- Beskyt vægten mod kraftige stød og vibrationer.
- Tag batteriet ud af enheden, når det er opbrugt, eller hvis vægten ikke skal bruges i længere tid. Dette forhindrer skader forårsaget af lækage.
- Vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-) ved isættelse og udskiftning af batterier.
- Udsæt ikke batterierne for ekstreme forhold, f.eks. ved at opbevare dem på radiatorer eller i direkte sollys. Øget risiko for lækage!
- Rengør batteri- og enhedskontakterne, hvis det er nødvendigt, før de isættes.
- Foretag ingen ændringer på produktet. Lad kun et autoriseret værksted udføre reparationer. Forkert udførte reparationer kan medføre betydelig fare for brugeren.
- Placér ikke vægten i nærheden af enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, såsom mobiltelefoner, radioer eller lignende. Dette kan føre til forkerte displayvisninger eller funktionsfejl.
- På undersiden af vægten findes apparatfødder. Da gulvoverflader består af mange forskellige materialer og behandles med forskellige rengøringsmidler, kan det ikke udelukkes, at nogle af disse stoffer indeholder bestanddele, der angriber og blødgør apparatfødderne. Læg eventuelt en skridsikker måtte under vægten..

Formålsbestemt brug

Personvægten er beregnet til vejning af personer i private hjem. Den er ikke egnet til brug på klinikker, i lægepraksisser osv. Den maksimale kapacitet på 220 kg må ikke overskrides.



Oversigt

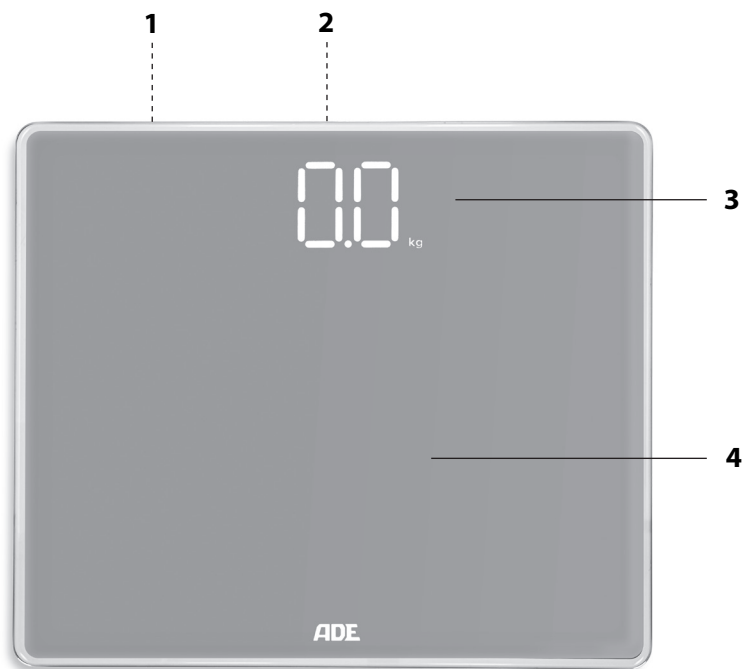

- 1 Batterirum (underside)
- 2 Knap Unit (underside): Skift måleenhed
- 3 Display
- 4 Vægtflade

Leveringsomfang

- Badeværelsesvægt
- Batteritype AAA, 1,5 V (3x)
- Betjeningsvejledning



Idriftsættelse

Isætning/udskiftning af batterier

Du skal bruge 3 stk. AAA-batterier, 1,5 V (medfølger), for at bruge vægten. Batterirummet er placeret på undersiden af enheden.

1. Skub dækslet til batterirummet mod midten af vægten, og fjern dækslet.
2. Isæt batterierne som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-).
3. Sæt batterirumsdækslet på igen. Låsetappen skal klikke hørbart på plads.



Bemærkninger om batteriskift:

- Et batteriskift er nødvendigt, når displayet viser ,Lo', eller når displayet er helt blankt.
- Brug kun den batteritype, der er angivet i de ,Tekniske data' .
- Udskift altid alle batterier samtidigt.
- Bortskaf brugte batterier miljømæssigt korrekt, se ,Bortskaffelse'.
- Kalibrer vægten, se ,Opstilling af vægt'.

Vælg måleenhed

Ved levering er måleenheden som standard indstillet til ,kg'. Måleresultatet kan dog også vises i de engelske måleenheder ,lb' (pound) eller ,st' (stone :pound).

1. Tænd vægten ved at træde midt på vægtfladen.
2. Tryk gentagne gange på knappen UNIT på vægtens bagside. Bemærk displayvisningen.

Opstilling af vægten

1. Placer vægten på et jævnt, fast og tørt underlag. Stil ikke vægten på et tæppe.
2. Træd kortvarigt én gang midt på vægtfladen for at kalibrere vægten. Kalibreringen er fuldført, når displayet viser "0.0". Denne kalibrering skal udføres efter hvert batteriskifte.



Vejning



ADVARSEL om personskade

- Undgå at træde op på vægten med våde fødder, og betræd ikke vægten, hvis overfladen er fugtig. Fare for udskridning!

- Stil dig op på vægten. Stå stille og hold dig ikke fast i noget.

Vægten tændes, og kort efter blinker displayvisningen: Den målte vægt vises i den valgte måleenhed. Vægten slukker automatisk få sekunder efter, at du har forladt vægtfladen



- Vægten vises i op til ca. 10 sekunder efter, at du er steget af vægten. Hvis du træder let på vægtfladen, vises „0.0“ i displayet, og du kan veje dig igen.
- Vej dig helst uden beklædning.
- Forsøg altid at veje dig på samme tidspunkt og under ensartede forhold for at opnå sammenlignelige resultater.

Nulstil vægt

Nulstil vægten til fabriksindstillingerne, hvis der vises usædvanlige eller åbenlyst forkerte værdier på displayet.

1. Fjern batterierne fra batterirummet, og vent et øjeblik.
 2. Isæt batterierne igen. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet (+/-).
- Efter genstart kan du veje dig som normalt.

Rengøring



BEMÆRK vedrørende materielle skader

- Nedsæk ikke vægten i vand eller andre væsker.
- Brug under ingen omstændigheder hårde, ridende eller skurende rengøringsmidler eller lignende til rengøring af vægten. Dette kan ridse overfladen.
- Aftør om nødvendigt vægten med en let fugtig, blød klud.
- Desinficér vægtfladen fra tid til anden med et egnet desinfektionsmiddel (kan købes i specialforretninger og hos materialister).



Fejlfinding / Afhjælpning

Fejlfinding	Mulig årsag
Ingen funktion	▪ BEr batterierne flade eller isat forkert?
Vægten viser åbenlyst forkerte måleresultater	▪ Står vægten på et fast og jævnt underlag? ▪ Er der i nærheden af vægten et apparat, der kan forårsage elektromagnetisk interferens? ▪ Tag batterierne ud af vægten, og vent et øjeblik. Isæt batterierne igen.
På displayet vises ,Err‘	▪ Vægtens maksimale kapacitet på 2 20 kg er overskredet
På displayet vises ,Lo‘	▪ Batterierne er flade, se afsnittet ,Isætning/udskiftning af batterier‘.
På displayet vises ,C‘.	▪ Displayvisningen slettes (,C‘ = ,Clear‘).

Tekniske specifikationer

Model:	Personvægt BE 2304 „Valerie“
Batteri:	3x AAA / 1,5 V
Nominel strøm:	10 mA
Måleområde:	max. 220 kg / min. 5 kg
Afvigelse:	1 % +/- 100g
Inddeling:	100 g
Vægt:	ca. 1,6 kg
Mål, vægt:	ca. 350 x 300 x 22 mm
Markedsfører:	GREND'S GmbH
(Ingen serviceadresse)	Stahlwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Vores produkter videreudvikles og forbedres løbende.

Af denne grund forbeholder vi os retten til designmæssige og tekniske ændringer.



Overensstemmelseserklæring

GRENDS GmbH erklærer hermed, at den elektroniske personvægt BE 2304 er i overensstemmelse med direktiverne 2014/30/EU og 2011/65/EU. Erklæringen bortfalder, hvis der foretages ændringer på enheden, som ikke er godkendt af os.

Hamburg, April 2025
GRENDS GmbH



Garanti

GRENDS GmbH garanterer i 2 år fra købsdatoen for udbedring af mangler, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl, ved reparation eller ombytning. I tilfælde af reklamation bedes du returnere varen til forhandleren sammen med købsbeviset (med en beskrivelse af fejlen).





Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage



Sorter emballagen efter type, og bortskaf den derefter. Aflever pap og karton til papirindsamling og folier til plastindsamling.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf produktet i overensstemmelse med de gældende lokale forskrifter.



Dette symbol indikerer, at dette elektriske eller elektroniske apparat ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent, men skal indleveres til separat indsamling. I nærheden af dig findes der gratis indsamlingssteder, hvor du kan indlevere apparater til genanvendelse. Du kan få oplyst adresser hos din kommune.

Forhandlere af elektriske og elektroniske apparater, herunder onlineforhandlere, er også forpligtet til at tage udtjente elektriske og elektroniske apparater retur. Ved køb af et nyt apparat skal forhandleren på anmodning fra slutbrugeren tilbyde en gratis 1:1-tilbagetagelse af et udtjent apparat. Uden et nyt køb er de ovennævnte forhandlere forpligtet til på anmodning fra slutbrugeren gratis at tage op til tre udtjente apparater (maks. kantlængde på 25 cm) retur.

Batterierne skal tages ud af hovedenheden før bortskaffelse!

Batterierne skal bortskaffes separat fra de øvrige dele af apparatet.



Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du er ifølge loven forpligtet til at aflevere alle batterier på en genbrugsstation i din kommune/bydel eller i butikken. Indholdsstofferne er giftige og udgør en fare for miljøet ved ukorrekt bortskaffelse. De kan også have sundhedsskadelige virkninger på mennesker, dyr og planter.

- Batterierne skal være fuldstændigt afladte før bortskaffelse. Lad apparatet være tændt, indtil displayet ikke viser noget.
- Fjern derefter batterierne fra apparatet som beskrevet i afsnittet »Ibrugtagning