



ADE

Badevægt Katharina

Dansk



BE 1723-1



BE 1723-2

Betjeningsvejledning

BE 1723-1 | BE 1723-2





Kære kunde, Kære kunde !

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt af mærket ADE, som kombinerer intelligente funktioner med et exceptionelt design. Denne personvægt giver dig mulighed for at måle og kontrollere din kropsvægt. ADEmærkets mangeårige erfaring sikrer en høj teknisk standard og dokumenteret kvalitet. Vi ønsker dig god fornøjelse med vejningen og held og lykke med at nå din ønskede vægt! Dit ADE-team

Om denne vejledning

Über diese Anleitung



Denne betjeningsvejledning beskriver sikker brug og vedligeholdelse af produktet. Opbevar denne betjeningsvejledning, så du kan slå information op senere. Hvis du overdrager produktet til en anden person, skal du også vedlægge denne vejledning. Manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning kan medføre personskaade eller beskadigelse af produktet.

Symbolforklaring



Dette symbol i forbindelse med ordet FARE advarer om alvorlige personskaader.



Dette symbol i forbindelse med ordet ADVARSEL advarer om personskaader af moderat eller let omfang.



Dette symbol i forbindelse med ordet BEMÆRK advarer om materiel skade.



Dieses Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen und allgemeine Hinweise.



Indholdsfortegnelse

Generelt.....	2
Sikkerhed.....	4
Anvendelsesformål.....	5
Oversigt.....	6
Leveringsomfang.....	6
Ibrugtagning	7
Vejning	8
Nulstil vægt.....	8
Rengøring....	8
Fejlfinding / Afhjælpning.....	9
Tekniske specifikationer	9
Overensstemmelseserklæring.	10
Garanti.....	10
Bortskaffelse.....	11



Sikkerhed

- Denne artikel kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af artiklen, og forstår de risici, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med artiklen.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år eller ældre, og under opsyn.
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Opbevar derfor vægten og batteriet utilgængeligt for små børn. Hvis et batteri er blevet slugt, skal der straks søges lægehjælp.

FARE for børn

- Hold børn væk fra emballagematerialet. Ved indtagelse er der fare for kvælning. Vær opmærksom på, at emballageposen ikke trækkes over hovedet.

FARE for brand/forbrænding og/eller eksplosion

- Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batteriet. Udskift kun batteriet med samme eller en tilsvarende batteritype. Overhold de 'Tekniske data'.
- Batterier må ikke oplades, forsøges genoplivet med andre midler, skilles ad, smides i åben ild eller kortsluttes. Ellers er der øget risiko for eksplosion og lækage, og derudover kan der frigives gasser!
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skylles de berørte områder straks med rigeligt rent vand, og søg omgående læge.

ADVARSEL mod risiko for personskade

- Undgå at træde på den yderste kant af vægten på én side. Fare for at vælte!
- Betræd ikke vægten med våde fødder, og undgå at bruge vægten, hvis overfladen er fugtig. Fare for udskridning!

FORSIGTIG – materiel skade

- Placér vægten på et stabilt og jævnt underlag.
- Overbelast ikke vægten. Overhold de 'Tekniske data'. Vægten må kun betrædes under vejning.
- Beskyt vægten mod kraftige stød og vibrationer.
- Fjern batteriet, hvis det er brugt op, eller hvis vægten ikke skal bruges i længere tid. Dette forhindrer skader forårsaget af lækage.
- Vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-) ved isættelse og udskiftning af batterierne.




- Udsæt ikke batterierne for ekstreme forhold, eksempelvis ved at opbevare dem på radiatorer eller i direkte sollys. Øget risiko for lækage!
- Rengør om nødvendigt batteri- og apparatkontakter før isættelse.
- Foretag ingen ændringer på produktet. Overlad reparationer til et autoriseret værksted. Forkert udførte reparationer kan medføre betydelig fare for brugeren.
- Placér ikke vægten i nærheden af udstyr, der udsender elektromagnetisk stråling, såsom mobiltelefoner, radioer eller lignende. Dette kan medføre fejlagtige displayvisninger eller funktionsfejl.
- Vægten er udstyret med fødder på undersiden. Da gulvbelægninger er fremstillet af mange forskellige materialer og behandles med forskellige rengøringsmidler, kan det ikke udelukkes, at visse af disse stoffer indeholder komponenter, der kan beskadige og blødgøre fødderne. Læg eventuelt et skridsikkert underlag under vægten.

Anvendelsesformål

Personvægten er beregnet til vejning af personer i private hjem. Den er ikke egnet til anvendelse i klinikker, lægepraksisser o.l. Den maksimale kapacitet på 200 kg må ikke overskrides.



Oversigt

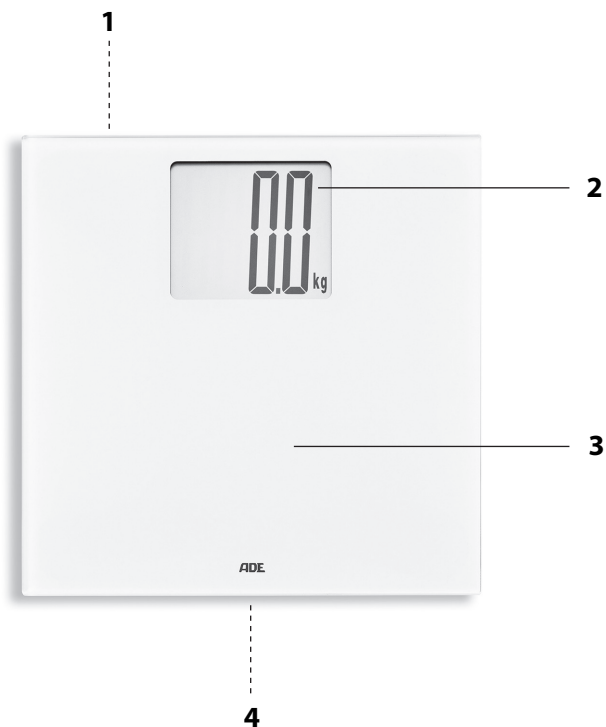

- 1 Knap Unit (Underside): Skift måleenhed
- 2 Display
- 3 Vægtflade
- 4 Batterirum (undersiden)

Leveringsomfang

- Badeværelsesvægt
- Batteritype AAA, 1,5 V (3x)
- Betjeningsvejledning



Ibrugtagning

Isættelse/udskiftning af batterier

Til brug skal du anvende 3 stk. AAA-batterier, 1,5 V (medfølger). Batterirummet er placeret på enhedens underside.

1. Tryk låsetappen i retning mod vægtens kant, og fjern dækslet til batterirummet.
2. Isæt batterierne, som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på korrekt polaritet (+/-).
3. Sæt dækslet til batterirummet på igen. Låsetappen skal klikke hørbart på plads.



Bemærkninger om batteriudskiftning:

- Batteriudskiftning er nødvendig, hvis displayet viser 'Lo' eller ingen-ting.
- Anvend kun den batteritype, der er specificeret i de 'Tekniske data'.
- Udskift altid alle batterier samtidigt.
- Bortskaf brugte batterier miljømæssigt korrekt, se 'Bortskaffelse'.
- Kalibrer vægten, se 'Opsætning af vægt'.

Vælg måleenhed

Som standard er måleenheden indstillet til 'kg' ved levering. Måleresultatet kan også vises i de engelske måleenheder 'lb' (pund) eller 'st lb' (stone;pund).

1. Tænd vægten ved at træde midt på vægtfladen.
2. Tryk gentagne gange på knappen Unit på vægtens bagside. Vær opmærksom på displayvisningen..

Opstilling af vægten

1. Placer vægten på en jævn, fast og tør overflade. Undlad at placere vægten på et tæppe.
2. Træd én gang kortvarigt midt på vægtfladen for at kalibrere vægten. Kalibreringen er fuldført, når displayet viser '0.0'. Denne kalibrering skal udføres efter hver batteriudskiftning.



Vejning



Vejning

- Betræd ikke vægten med våde fødder, og undgå at betræde vægten, hvis overfladen er fugtig. Fare for udskridning!

- Stil dig op på vægten. Stå stille og hold ikke fast i noget.

Vægten tænder, og kort efter blinker displayet: Den målte vægt vises i den valgte måleenhed. Vægten slukker automatisk få sekunder efter, at du har forladt vægtfladen.



- Vægten vises i op til ca. 10 sekunder efter, at du er steget af vægten. Hvis du træder let på vægtfladen, vises „0.0“ i displayet, og du kan veje dig igen.
- Vej dig helst uden tøj.
- Forsøg altid at veje dig på samme tidspunkt og under ensartede forhold for at opnå sammenlignelige resultater.

Nulstil vægt

Nulstil vægten til fabriksindstillingerne, hvis displayet viser usædvanlige eller åbenlyst forkerte værdier.

1. Fjern batterierne fra batterirummet, og vent et øjeblik.
 2. Isæt batterierne igen. Vær opmærksom på batteriernes korrekte polaritet (+/-).
- Efter tænding kan du igen veje dig som normalt.

Rengøring



BEMÆRK: Risiko for materiel skade

- Nedsænk ikke vægten i vand eller andre væsker.
- Brug under ingen omstændigheder skrappe, ridende eller slibende rengøringsmidler til rengøring af vægten. Dette kan ridse overfladen.
- Aftør om nødvendigt vægten med en let fugtig, blød klud.
- Desinficér vægtfladen lejlighedsvis med et egnet desinfektionsmiddel (fås i specialforretninger og hos materialister).



Fejlfinding / Afhjælpning

Fejl	Mulig årsag
Ingen funktion	▪ Er batterierne flade eller isat forkert?
Vægten viser tydeligt forkerte målinger	▪ Står vægten på et fast og jævnt underlag? ▪ Er der i nærheden af vægten et apparat, der kan forårsage elektromagnetisk interferens? ▪ Fjern batterierne fra vægten, vent et øjeblik, og isæt dem igen
Displayet viser „Err“	▪ Vægtens maksimale kapacitet på 200 kg er overskredet.
Displayet viser „Lo“	▪ Batterierne skal udskiftes, se afsnittet „Isætning/udskiftning af batterier“.

Tekniske specifikationer

Model:	Personenwaage BE 1723 „Katharina“
Batteri::	3x AAA / 1,5 V
Nominel strøm:	3 mA
Måleområde:	max. 200 kg
Afvigelse::	1 % +/- 100g
Inddeling::	100 g
Vægt::	ca. 1,6 kg
Mål, vægt:	ca. 300 x 300 x 23 mm
Importør:	GREND'S GmbH
(ingen serviceadresse)	Stahltwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Vores produkter udvikles og forbedres løbende. Af denne grund forbeholder vi os retten til at foretage designmæssige og tekniske ændringer.



Overensstemmelseserklæring

GREND'S GmbH erklærer hermed, at den elektroniske personvægt BE 1723 -x er i overensstemmelse med direktiverne 2014/30/EU og 2011/65/EU. Erklæringen er ikke længere gyldig, hvis der foretages ændringer på enheden, som ikke er godkendt af os.

Hamburg, April 2025
GREND'S GmbH



Garanti

GREND'S GmbH garanterer i 2 år fra købsdatoen, at mangler som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, vil blive afhjulpet gratis ved reparation eller ombytning. I tilfælde af reklamation bedes du returnere varen til din forhandler sammen med købsbeviset (med angivelse af reklamationsårsagen).





Bortskaffelse

Emballagebortskaffelse



Sorter emballagen efter type og bortskaf den. Aflever pap og karton til genbrugspapir og folier til plastindsamling

Bortskaffelse af produkt

Bortskaf produktet i overensstemmelse med gældende lovgivning i dit land.



Dette symbol betyder, at dette elektriske eller elektroniske apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid, men skal indsamles separat. I nærheden af dig findes der gratis indsamlingssteder, hvor apparater kan afleveres til genanvendelse. Du kan få oplyst adresser hos din kommune.

Også (online-)distributører af elektriske og elektroniske apparater er forpligtet til at tage udtjente elektriske og elektroniske apparater retur. Ved køb af et nyt apparat skal distributøren på slutbrugerens anmodning foretage en gratis 1:1-tilbagetagning af et udtjent apparat. Uden nyanskaffelse er de ovennævnte distributører forpligtet til, på slutbrugerens anmodning, at tage op til tre udtjente apparater (maks. kantlængde på 25 cm) gratis retur.

Batterierne skal fjernes fra hovedenheden før bortskaffelse!

Batterierne skal bortskaffes separat fra de øvrige dele af apparatet.



Dette symbol betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Du er ifølge loven forpligtet til at aflevere alle batterier på et indsamlingssted i din kommune/bydel eller i butikker, der forhandler dem. Indholdsstofferne er giftige, og ved ukorrekt bortskaffelse udgør de en fare for miljøet og kan have sundhedsskadelige virkninger på mennesker, dyr og planter.

- Batterierne skal være fuldstændigt afladte før bortskaffelse. Lad apparatet være tændt, indtil der ikke længere vises noget i displayet
- Fjern derefter batterierne fra apparatet som beskrevet i afsnittet „Inbetriebnahme“.